




Protector dental

para quirófano

One Size 
Un solo uso

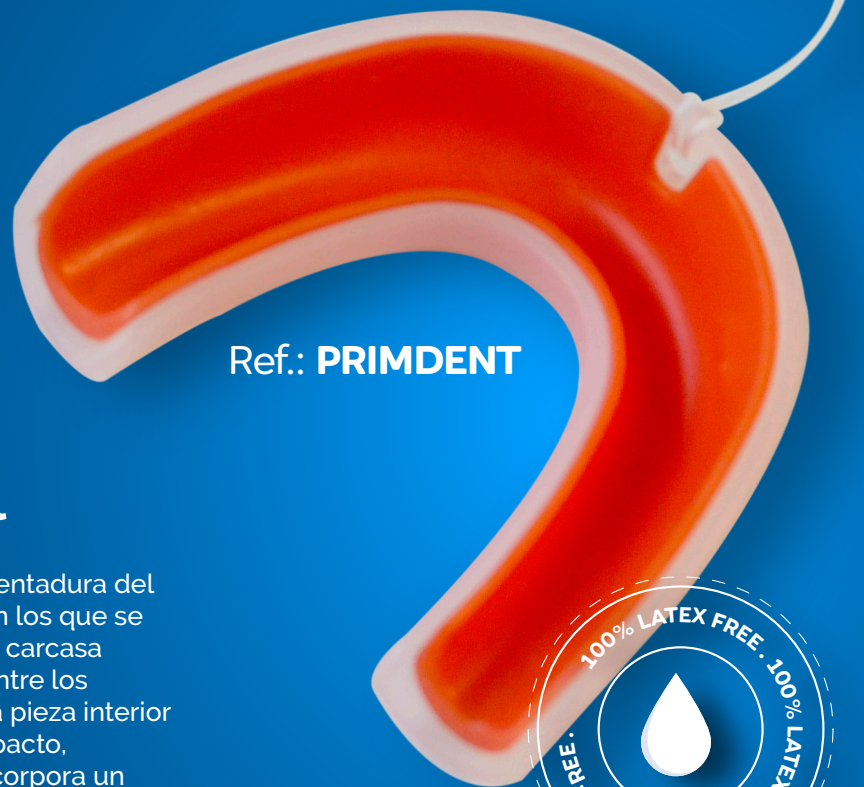

Ref.: PRIMDENT



Protector dental

Protector dental diseñado para proteger la dentadura del paciente durante procedimientos médicos en los que se puedan dañar los dientes. Fabricado con una carcasa externa resistente que actúa como barrera entre los dientes y el instrumental médico. Incluye una pieza interior de material amortiguador que absorbe el impacto, proporcionando una protección adicional. Incorpora un cordón de seguridad para facilitar la extracción del protector cuando sea necesario.



Contraindicaciones

- Producto no estéril. No usar cuando se requieran condiciones de esterilidad.
- No usar en niños o en pacientes con el tamaño del arco dental muy pequeño.
- Uso no recomendado en pacientes con dentadura postiza.
- No usar para tratar afecciones dentales como bruxismo.
- No usar en pacientes con movilidad dental avanzada.
- No reutilizar el producto, para un uso exclusivamente.




Indicaciones

Cirugía endoscópica y procedimientos en los cuales se precise el empleo de la pala laparoscópica. Protección dental.

Protector dental

para quirófano

Ref.: PRIMDENT

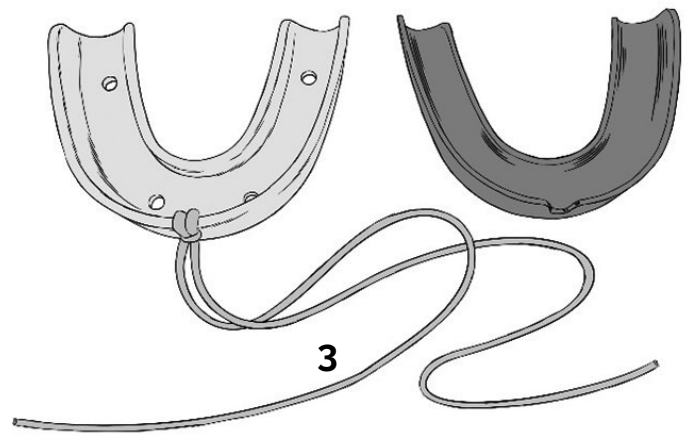

Protector dental

El protector dental desechable, **de un solo uso**, es el producto sanitario adecuado para la **protección de la dentadura del paciente durante la introducción de la pala del laringoscopio o en la cirugía endoscópica**, junto con el tubo endotraqueal, actos en los que se pueden dañar los dientes del paciente.

El uso de protectores dentales durante la intubación ha sido sugerido como una **medida preventiva para reducir el riesgo de lesiones dentales**.

Adaptable prácticamente a cualquier paciente.

Cada set se compone de:

- **Relleno de silicona extra-blanda altamente deformable** para que se adapte a cualquier configuración de dientes para amortiguar la presión en las encías. Atraumático. (1)
- **Coraza rígida externa** que presenta una cierta flexibilidad que se adapta a cualquier dentadura. (2)
- **Hilo de seguridad** para la extracción. (3)

